

MGA

— MEDICAL GLOBAL AESTHETIC —

# CRYOLIPOLYSE



*Réduction non invasive par le froid  
des amas graisseux localisés*



# LA CRYOLIPOLYSE EST UN PROCÉDÉ RECONNU ET VALIDÉ, QUI UTILISE LE FROID INTENSE CONTRÔLÉ POUR RÉDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LES AMAS GRAISSEUX LOCALISÉS SANS AVOIR RECOURS À LA CHIRURGIE


## DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

La technique de cryolipolyse produit un froid intense qui agit sur les cellules graisseuses du tissu hypodermique sans endommager les tissus environnants. Ainsi, les adypocytes, après avoir été exposés aux basses températures, rentreront dans un processus de dégradation naturelle (apoptose). Leur élimination sera progressive dans le temps et leurs composants seront pris en charge et éliminés par l'organisme.

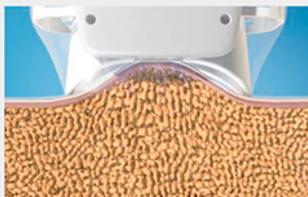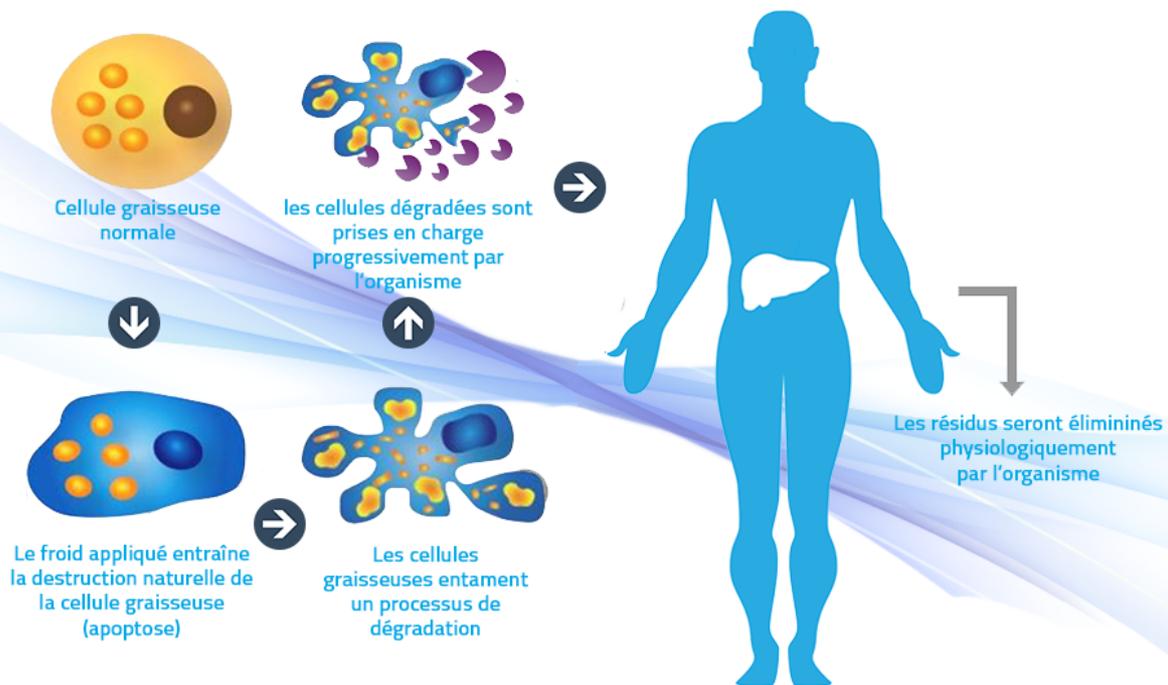

### ASPIRATION

Maintient du plis cutané à traiter dans l'applicateur

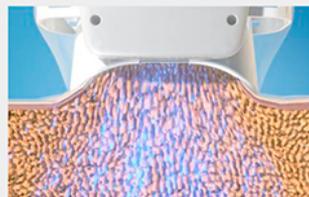


### APPLICATION DU FROID

Diffusion progressive et contrôlée du froid intense



### REFROIDISSEMENT

N'impacte que la couche de graisse sans endommager les tissus environnants

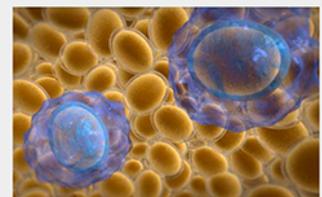

### APOPTOSE

Processus de destruction naturelle des cellules graisseuses

## EFFICACITÉ DU TRAITEMENT

Chaque traitement de cryolipolyse engendre une réduction allant jusqu'à 30% de la masse graisseuse dans la zone traitée

## VISIBILITÉ DES RÉSULTATS

Les effets commencent à apparaître dans les 3 semaines après le traitement et le résultat final sera visible après 2 mois



MGA

— MEDICAL GLOBAL AESTHETIC —

**HARMONISER LA SILOUHETTE CORPORELLE**  
en agissant sélectivement avec la Cryolipolyse sur les lipodystrophies localisées

# CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES À MAIN



Thickness	Dose	Time
<20mm	0 °C	60min
20-40mm	-5 °C	45min
30-50mm	-8 °C	40min
50-60mm	-10 °C	40min
>60mm	-11 °C	40min

**ÉCRAN TACTILE**  
Interface optimisée

**JUSQU'À -9°C**  
Système de refroidissement performant



**GÉNÉRATEUR LED ROUGE**

Indique l'émission de chaleur, accélère la circulation sanguine et son oxygénation



**GÉNÉRATEUR LED VERT**

Indique l'émission de froid, réduit le gonflement de la peau pendant la diffusion du froid

PLAQUE DE REFROIDISSEMENT PLUS GRANDE

Zones de traitements maximisées de 38%



CHAMBRE D'ASPIRATION ÉLARGIE

Adaptée aux plis cutanés plus volumineux



BOUTON DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE

APPLICATEUR OPTIMISÉ POUR LES ZONES DIFFICILES À ATTEINDRE

# ZONES DE TRAITEMENT


<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAM 100</b></li> <li>■ Abdomen, bras et intérieur de cuisse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAM 150</b></li> <li>■ Convient aux zones incurvées et étroites du corps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAM 200</b></li> <li>■ Adaptée aux contours de l'abdomen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAM 300</b></li> <li>■ Conseillée pour le traitement de zones importantes</li> </ul>




- Abdomen
- Intérieur de cuisse
- Extérieur de cuisse
- Soutien-gorge
- Poignées d'amour
- Fesses



- Torse
- Abdomen
- Intérieur de cuisse
- Extérieur de cuisse
- Haut du dos
- Poignées d'amour

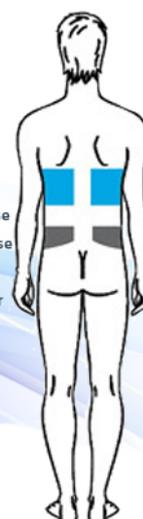

## AVANT - APRÈS

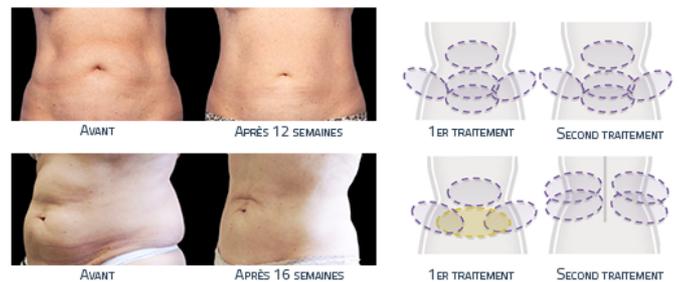

## FAQ CRYOLIPOLYSE

### INDICATIONS

Les indications sont les surcharges graisseuses localisées (ventre, taille, bras ...). La cryolipolyse ne se substitue pas aux méthodes médicales et chirurgicales du traitement de l'obésité.

### DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

Le praticien positionne les pièces à main sur les zones à traiter afin d'aspirer le plis cutané qui sera impacté par le froid.

### SENSATIONS DURANT LE TRAITEMENT

Au début du traitement, une courte émission de chaleur peut être diffusée pendant 2 à 5 minutes, et sera suivie d'une émission de froid intense pendant 30 à 50 minutes. La légère sensation d'inconfort se dissipe très rapidement, grâce à l'effet du froid.

### PÉRIODE POST-TRAITEMENT SANS ÉVICTION SOCIALE

Au terme de la séance le patient peut reprendre aussitôt une activité normale. Il peut apparaître quelques faibles rougeurs, picotements ou engourdissements sur la zone traitée de manière temporaire.

### APPARITION DES RÉSULTATS

Les premiers résultats commencent à se percevoir au cours des 3 semaines suivant le traitement et les changements les plus significatifs après 2 mois. Toutefois, le corps continuera à éliminer les cellules graisseuses dans les 4 à 6 mois qui suivent le traitement.

### POUR QUELS RÉSULTATS?

Chaque traitement entraîne une réduction visible de la masse graisseuse sur la zone traitée (entre 20% et 30% selon les individus). Une fois le traitement terminé, il est possible de réduire à nouveau la masse graisseuse par des traitements additionnels bien que les patients estiment généralement qu'un seul est suffisant pour atteindre leur objectif.

### LES RÉSULTATS SONT-ILS PERMANENTS?

Lors d'un traitement par cryolipolyse, les cellules graisseuses traitées sont détruites. Le patient pérenisera sa nouvelle silhouette en prêtant attention à une bonne hygiène de vie et un bon équilibre alimentaire.

# MGA

— MEDICAL GLOBAL AESTHETIC —

- 1 4 pièces à main adaptées aux différentes zones du corps
- 2 Double pompe à air pour une utilisation simultanée des 2 applicateurs
- 3 Mode thermique paramétrable du positif au négatif
- 4 Mobilisation du plis cutané paramétrable en fixe ou dynamique
- 5 Écran tactile et interface intuitive pour un meilleur confort d'utilisation
- 6 Package communication Flyers patients et posters
- 7 Certification CE médical Garantie constructeur 3 ans incluse



## — CONTACTEZ-NOUS —



WWW.M-G-A.FR



CONTACT@M-G-A.FR



01 53 81 91 42